

Запчасти

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gzm@nt-rt.ru || сайт: <https://gomelzip.nt-rt.ru/>

ЗИП ГОМЕЛЬ 1Е5.184.412 Ключ электролитический



Предназначается для установки в него электрода сравнения с целью предотвращения попадания в измеряемый раствор хлористого калия.

Характеристики 1Е5.184.412

Характеристики:

- Материалы - стекло марки 320 и С93-2, кварцевое волокно, резина марки 1432;
- Габаритные размеры - 55х25 мм;
- Масса - 2,3 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 1Е5.887.425 Бачок к рNa



Предназначен для раствора хлористого калия, расположен в гидроблоке анализатора иономерного рNa-205.

Характеристики 1Е5.887.425

Характеристики:

- Материалы изготовления:
 - полипропилен 01020-06 ГОСТ 26996-86;
 - смесь резиновая ИРП-1265 ТУ 38103321-76 (кольцо уплотнительное);
- Габаритные размеры - 153х68 мм;
- Масса - 90 гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 1Е6.872.065 Бачок к рNa



Предназначен для раствора аммиака, расположен в гидроблоке анализатора иономерного рNa-205.

Характеристики 1Е6.872.065

Характеристики:

- Материалы изготовления:
 - полипропилен 01020-06 ГОСТ 26996-86 (крышка);
 - полипропилен 01030 ТУ 2211-015-002003521-95 (гайка);
 - полистирол 525 ТУ 2214-126-05766801 (бачок).
- Габаритные размеры - 161x82 мм;
- Масса - 200 гр

ЗИП ГОМЕЛЬ 1Е8.210.400 Стакан (для микроизмерений)



Изготовлен из пластмассы. Выполняет роль промежуточного сосуда и устанавливается на датчике под катодным анодным отсеками сосуд.

Характеристики 1Е8.210.400

Характеристики:

- Габаритные размеры - высота 64 мм, Ø 96 мм;
- Масса - 120 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 1E8.685.182 Кольцо



Уплотнительное кольцо.

Характеристики 1E8.685.182

Характеристики:

- Материал - резина.

ЗИП ГОМЕЛЬ 1Е8.685.659 Прокладка к АС-7932 и АС-7932М



Резиновое кольцо для герметизации при установке катода в корпус.

Характеристики 1Е8.685.659

Характеристики:

- Внутренний диаметр - 10 мм;
- Внешний диаметр - 15 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.329.001 Датчик к АН-7529/60, АН-7529/60М



Датчик - это комплектующая деталь, применяемая совместно с анализаторами к АН-7529/60, АН-7529/60М.

Характеристики 5М2.329.001

Характеристики:

- Габаритные размеры - 700x230x250 мм;
- Масса - 15 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.329.001-01 Датчик к АН-7529/60, АН-7529/60М



Датчик - это комплектующая деталь, применяемая совместно с анализаторами к АН-7529/60, АН-7529/60М.

Характеристики 5М2.329.001-01

Характеристики:

- Габаритные размеры - 700x230x250 мм;
- Масса - 15 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.329.001-04 Датчик к АН-7529/60, АН-7529/60М



Датчик - это комплектующая деталь, применяемая совместно с анализаторами к АН-7529/60, АН-7529/60М.

Характеристики 5М2.329.001-04

Характеристики:

- Габаритные размеры - 700x230x250 мм;
- Масса - 15 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.329.001-05 Датчик к АН-7529/60, АН-7529/60М



Датчик - это комплектующая деталь, применяемая совместно с анализаторами к АН-7529/60, АН-7529/60М.

Характеристики 5М2.329.001-05

Характеристики:

- Габаритные размеры - 700x230x250 мм;
- Масса - 15 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.329.002 Датчик к АС-7932, АС-7932М



Датчик предназначен для совместного использования с анализаторами АС-7932, АС-7932М.

Характеристики 5М2.329.002

Характеристика	Значение
Габаритные размеры	500x250x260 мм
Масса	6 кг

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.840.066 Система электродов к АН-7529/60, АН-7529/60М



Выполнена в кожухе из нержавеющей стали.

Устанавливается на плите датчика. Электродная система соединяется специальным антивибрационным кабелем со входом рН-метра, находящемся в измерительном блоке.

Характеристики 5М2.840.066

Характеристики:

- Габаритные размеры - 140x40x35 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.840.075 Система электродов к АС-7932 и АС-7932М



Выполнена в кожухе из нержавеющей стали. Устанавливается на плите датчика.
Электродная система соединяется специальным антивибрационным кабелем со входом рН-метра, находящемся в измерительном блоке.

Характеристики 5М2.840.075

Характеристики:

- Габаритные размеры - 140x60x35 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.840.084-02 Датчик (к АЖА) ДК-02М



Датчик кислорода ДК-02 М состоит из корпуса с разъемом и электролитной камеры, состоящей из корпуса электролитной камеры, колпачка, кольца, гайки, прокладки, кольца пластмассового и мембраны.

В нижней части корпуса, погружаемой в электролит расположена электродная система, состоящая из анода и катода.

В качестве ионоселективной мембраны применена фторопластовая пленка.

В нерабочем состоянии мембрана защищена от механических повреждений и высыхания колпачком, заполненным дистиллированной водой

Характеристики 5М2.840.084-02

Характеристики:

- Материал - фторопластовая пленка.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.954.002 Блок газоподготовки



Применим для приборов: АН-7529 и АН-7529М.

Характеристики 5М2.954.002

Характеристики:

- Габаритные размеры - 450x200x150 мм;
- Масса - 5 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.954.002-01 Блок газоподготовки



Применим для приборов: АН -7560 и АН -7560М.

Характеристики 5М2.954.002-01

Характеристики:

- Габаритные размеры - 450x200x150 мм;
- Масса - 5 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М2.954.003 Блок газоподготовки



Применим для приборов: АС -7932 и АС -7932М.

Характеристики 5М2.954.003

Характеристики:

- Габаритные размеры - 450x200x150 мм;
- Масса - 5 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М3.081.000 Клапан электромагнитный к БАТ



Предназначен для БАТ-15.2, БАТ-15.2МП. Выполнен в пластмассовом корпусе на основе электромагнита постоянного тока и предназначен для отключения или включения подачи титранта.

Характеристики 5М3.081.000

Характеристики:

- Питание - постоянный ток 6 В;
- Режим работы - импульсный.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.042 Комплект запасных частей 042 (к датчику АН-7529/60, АН-7529/60М)



Комплект запасных частей 042 для АН-7529/29М и АН-7560/60М.

Характеристики 5М4.070.042

Состав комплекта:

- Система электродов 5М2.840.066 - 1 шт;
- Вкладыш 5М6.215.003- 1шт;
- Вкладыш 5М6.215.004- 1шт;
- Вертушка 5М6.393.011- 1шт;
- Оправа 5М6.434.005- 1шт;
- Прокладка 5М7.840.071- 100шт;
- Кольцо 5М8.241.011-04- 5шт;

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.043 Комплект запасных частей 043 (к газовому тракту АН-7529/60 и АН7529/60М)




Комплект запасных частей 043 используется для ремонта газового тракта АН-7529/60 и АН-7529/60М.

Характеристики 5М4.070.043

Состав комплекта:

- Дроссель 5М5.150.000 - 1 шт;
- Фильтр 5М5.886.002 - 1 шт;
- Штуцер 5М6.454.002 - 1 шт;
- Дроссель 5М.7.010.004 - 4 шт;
- Кольцо 5М8.241.011-03 - 5 шт;
- Кольцо 5М8.241.011-05 - 5 шт;
- Кольцо 5М8.241.011-06 - 5 шт.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.044 Комплект запасных частей 044 (для датчика АС-7932, АС-7932М)

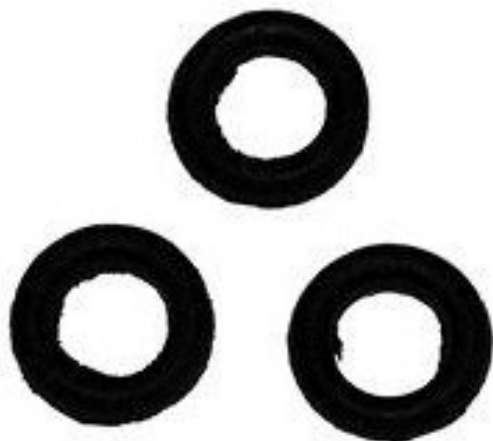


Комплект запасных частей 044 используется для ремонта анализаторов АС-7932, АС-7932М.

Характеристики 5М4.070.044

Состав комплекта:

- Система электродов 5М2.840.075 - 1 шт;
- Пластина 5М6.614.003 - 4 шт;
- Дроссель 5М7.010.005 - 2 шт;
- Трубка 5М7.867.011 - 2 шт;
- Кольцо 5М8.241.011-02 - 5 шт;
- Кольцо 5М8.241.011-04 - 5 шт;
- Кольцо 5М8.683.248 - 4 шт;

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.045 Комплект запасных частей 045 (для газового тракта АС-7932, АС7932М)

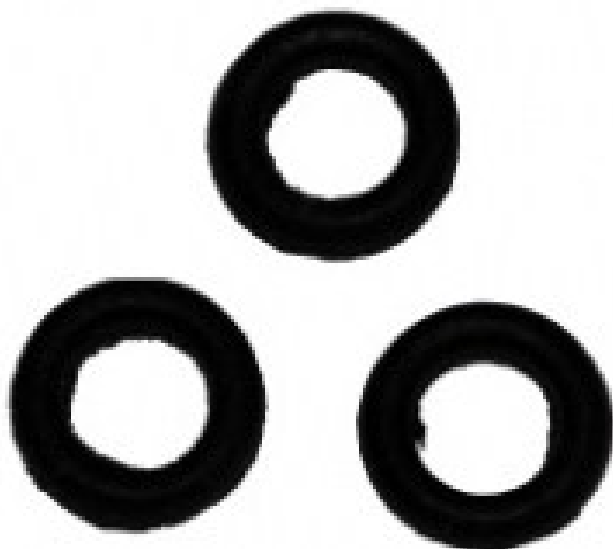

Комплект запасных частей 045 (для газового тракта АС-7932, АС-7932М).

Характеристики 5М4.070.045

Состав комплекта:

- Дроссель 5М7.010.006 - 2шт;
- Кольцо 5М8.241.011-03 - 5шт;
- Кольцо 5М8.241.011-05 - 5шт;
- Кольцо 5М8.241.011-08 - 5шт.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.049 Комплект запасных частей 049 (для И-160)



Предназначается для сопряжения И-160 с компьютером, для сопряжения измерительных электродов со штекером Ø 8 мм с разъемом «ИЗМ.» типа CP50.

Характеристики 5М4.070.049

Характеристики:

- Материалы -латунь ЛС59-1, поликарбонат ПК-ЛЭТ-7, полистирол 825, поливинилхлорид;
- Масса - 0,25 кг

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.053 Блок измерительный



Измерительный блок конструктивно выполнен в виде унифицированной конструкции. Для доступа к монтажу передней панели последняя выполнена откидывающейся. Фиксация панели осуществляется двумя винтами, расположенными под крышками боковых стенок блока. Радиатор крепится к тыльной части блока также винтами.

Характеристики 5М4.070.053

Характеристики:

- Материал корпуса - алюминий;
- Габаритные размеры - 330x150x335 мм;
- Масса - 10 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.053-01 Блок измерительный



Измерительный блок конструктивно выполнен в виде унифицированной конструкции. Для доступа к монтажу передней панели последняя выполнена откидывающейся. Фиксация панели осуществляется двумя винтами, расположенными под крышками боковых стенок блока. Радиатор крепится к тыльной части блока также винтами.

Характеристики 5М4.070.053-01

Характеристики:

- Материал корпуса - алюминий;
- Габаритные размеры - 330x150x335 мм;
- Масса - 10 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.053-02 Блок измерительный



Измерительный блок конструктивно выполнен в виде унифицированной конструкции. Для доступа к монтажу передней панели последняя выполнена откидывающейся. Фиксация панели осуществляется двумя винтами, расположенными под крышками боковых стенок блока. Радиатор крепится к тыльной части блока также винтами.

Характеристики 5М4.070.053-02

Характеристики:

- Материал корпуса - алюминий;
- Габаритные размеры - 330x150x335 мм;
- Масса - 10 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.058 затв Затвор



Затвор предназначен для герметизации фарфоровой трубы, при установке ее в печь. Состоит из корпуса с закрепленными на нем кронштейном и штуцером, двух откидных крышек – герметизирующей и запирающей, накидной гайки с шайбой.

Характеристики 5М4.070.058 затв

Характеристики:

- Материал изготовления:
 - корпус – алюминиевый;
 - крышки – нержавеющей сталь.
- Габаритные размеры - 120x90x90 мм;
- Масса - 1,1 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.058 компл Комплект запасных частей (к газовому тракту АН-7529/60, АН7529/60М, АС-7932 и АС-7932М)



Затвор предназначен для герметизации фарфоровой трубки, при установке ее в печь. Состоит из корпуса с закрепленными на нем кронштейном и штуцером, двух откидных крышек – герметизирующей и запирающей, накидной гайки с шайбой.

Характеристики 5М4.070.058 компл

Характеристики:

- Материал изготовления:
 - корпус – алюминиевый;
 - крышки – нержавеющая сталь.
- Габаритные размеры - 120x90x90 мм;
- Масса - 1,1 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.060 Штуцер к АН-7529(М), АН-7560(М)



Только для АН -7529(М), АН -7560(М). Выполняет роль пробки, герметизирующей задний конец фарфоровой трубки, установленной в печи. Состоит из латунного ребристого корпуса, отводного штуцера. Резиновой пробки и массивной металлической гайки.

Характеристики 5М4.070.060

Характеристики:

- Габаритные размеры - 100x41x25 мм;
- Масса - 340 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.064 компл Комплект запасных частей (к газовому тракту АН-7529/60 и АН7529/60М)



Фильтр 5М5.886.002 с ватным тампоном внутри предназначен для очистки кислородно-газовой смеси от пыли, образующейся после сгорания пробы в печи. Выполнен в пластмассовом корпусе и установлен на алюминиевой подставке

Характеристики 5М4.070.064 компл

Характеристики:

- Габаритные размеры - 155x75x78 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.064 фил Фильтр



Фильтр 5М5.886.002 с ватным тампоном внутри предназначен для очистки кислородно-газовой смеси от пыли, образующейся после сгорания пробы в печи.

Выполнен в пластмассовом корпусе и установлен на алюминиевой подставке.

Характеристики 5М4.070.064 фил

Характеристики:

- Габаритные размеры - 155x75x78 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.069 компл Комплект запасных частей (к датчику АН-7529/60 и АН-7529/60М)



Сосуд электролитической ячейки имеет два пластмассовых отсека, разделенных стеклянной перегородкой. Правый отсек – анодный, левый – катодный. Отсеки электрически соединены с помощью токопроводящей целлофановой пленки, закрывающей отверстие в перегородке между отсеками

Характеристики 5М4.070.069 компл

Характеристики:

- Габаритные размеры - 234x176x104 мм;
- Масса - 1,43 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.069 сос Сосуд к АН-7529М



Сосуд электролитической ячейки имеет два пластмассовых отсека, разделенных стеклянной перегородкой. Правый отсек – анодный, левый – катодный. Отсеки электрически соединены с помощью токопроводящей целлофановой пленки, закрывающей отверстие в перегородке между отсеками.

Характеристики 5М4.070.069 сос

Характеристики:

- Габаритные размеры - 234x176x104 мм;
- Масса - 1,43 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М4.070.069-01 Сосуд к АН-7560М 5М5.570.001



Сосуд электролитической ячейки имеет два пластмассовых отсека, разделенных стеклянной перегородкой. Правый отсек – анодный, левый – катодный. Отсеки электрически соединены с помощью токопроводящей целлофановой пленки, закрывающей отверстие в перегородке между отсеками.

Характеристики 5М4.070.069-01

Характеристики:

- Габаритные размеры - 234x176x104 мм;
- Масса - 1,43 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.135.001 Блок гидравлический к рNa



Является измерительным устройством в составе анализатора иономерного рNa-205. Конструктивно представляет собой алюминиевую панель, на которой расположена гидравлическая система, обеспечивающая непрерывное протекание анализируемого раствора. Панель закрывается крышкой из органического стекла.

Характеристики 5М5.135.001

Характеристики:

- Габариты гидроблока – 565 x 345 x 125 мм;
- Масса – не более 7 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.150.000 Дроссель к АН-7529/60 и АН-7529/60М



Три стеклянные трубки с внутренним диаметром 0,5, внешним – 4...6, соединенные между собой двумя резиновыми трубками. Устанавливается на выходе фильтра-поглотителя, обеспечивает необходимый расход кислорода.

Характеристики 5М5.150.000

Характеристики:

- Длина - 240 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.282.004 Штекер



Предназначается для подключения электродов, имеющим на проводе кабельный наконечник, к приборам с входом для штекера Ø 8 мм.

Характеристики 5М5.282.004

Характеристики:

- Материалы - латунь ЛС59 -1, поликарбонат ПК -ЛЭТ -7, полистирол 825;
- Габаритные размеры - Ø8мм L=85 мм;
- Масса - 17 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.500.003 Катод к АС-7932 и АС-7932М



Предназначен для датчика АС-7932, АС-7932М, устанавливается в корпус (катодный отсек сосуда). Представляет собой корпус из полипропилена, закрытый с 2-х сторон латунной и резиновой втулками. Из корпуса со стороны резиновой втулки выступает контакт из платиновой проволоки Ø 1,5 мм.

Характеристики 5М5.500.003

Характеристики:

- Длина выступающей части контакта - 6 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.500.004 Анод



Представляет собой цилиндрический корпус из полипропилена, закрываемый с двух сторон латунной и резиновой втулками. Из корпуса со стороны резиновой втулки выступает контакт из платиновой проволоки Ø1,5. Длина выступающей части контакта – 20 мм. Анод устанавливается в корпус (анодный отсек), расположенный на плате датчика.

Характеристики 5М5.500.004

Характеристики:

- Габаритные размеры - 142x28 мм;
- Масса - 22 гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.519.002 Электрод ртутно-капельный к ПУ



Входит в состав датчика полярографа универсального ПУ-1. Корпус электрода состоит из двух частей – корпуса и гайки накидной, выполненных из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Характеристики 5М5.519.002

Характеристики:

- Стекло́нная трубка диаметром - от 2 до 3,4 мм;
- Длина выступающей части трубки - 120 – 175 мм;
- Габаритные размеры - 18 х47 мм (без стеклянной трубки);
- Масса - 50 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.886.001 Фильтр грубой очистки к АС-7932М



Выполнен в корпусе из полистирола 825, закрытого с одной стороны фланцем из нержавеющей стали. В корпус установлены 2 латунных штуцера. Внутри фильтра установлена бязевая прокладка, которая зажимается пластмассовым винтом и резиновой прокладкой. Фильтр устанавливается на входе в лока газоподготовки экспресс-анализаторов на углерод АН -7529М/60М и экспресс-анализаторов на серу АС -7932М. Служит для очистки кислорода от механических примесей.

Характеристики 5М5.886.001

Характеристики:

- Габаритные размеры - Ø 40 x 90 мм;
- Масса - 150 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.886.002 Фильтр



Фильтр 5М5.886.002 с ватным тампоном внутри предназначен для очистки кислородно-газовой смеси от пыли, образующейся после сгорания пробы в печи.

Характеристики 5М5.886.002

Характеристики:

- Фильтр 5М5.886.002 выполнен в пластмассовом корпусе и установлен на алюминиевой подставке.
- Габаритные размеры - 155x75x78 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М5.886.005 Фильтр к АС-7932М



Является составной частью фильтра-охладителя (газотборника), который входит в состав экспресс-анализаторов на серу АС-7932М. Выполнен в цилиндрическом корпусе из прозрачного кварцевого стекла. Цилиндр сверху и снизу закрыт корпусами из сплава Д16. На верхнем корпусе установлен прижим с винтом из стали 08кп. В состав фильтра входят резиновые кольца (прокладки), штуцер из нержавеющей стали, шпильки из стали 20. Фильтр грубой очистки заполняется кварцевым песком и служит для поглощения сернистого газа при высоких температурах.

Характеристики 5М5.886.005

Характеристики:

- Габаритные размеры - 247x64x54 мм;
- Масса - 680 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.095.256 Лоток к К-99-80



Применяется для размещения медицинского инструмента в камере

Характеристики 5М6.095.256

Характеристики:

- Материал изготовления - органическое стекло;
- Габаритные размеры - 406х575х40 мм;
- Масса - 2,4 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.116.076 Корпус к АН-7529/60 и АН-7529/60М (поглотитель серы)



Для АН-7529 (М), АН-7560 (М). Представляет собой стеклянную трубку длиной 180 мм, предназначен для очистки кислородно-газовой смеси от окислов серы. Заполняется гранулами гидроперита или другими веществами, способными активно поглощать окислы серы.

Характеристики 5М6.116.076

Характеристики:

- Материал - стекло;
- Длина - 180 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.116.088 Корпус с катодом к АС-7932 и АС-7932М



Корпус в сборе (катодный отсек сосуда, но без катода, пластины, кольца и прокладки) выполнен из поликарбоната.

Характеристики 5М6.116.088

Характеристики:

- Габаритные размеры - 150х96 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.116.088-01 Корпус к АС-7932 и АС-7932М (сосуд к АС)



Корпус в сборе (катодный отсек сосуда, но без катода, пластины, кольца и прокладки)
выполнен из поликарбоната

Характеристики 5М6.116.088-01

Характеристики:

- Габаритные размеры - 150х96 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.116.089 Корпус к АС-7932 и АС-7932М)




Корпус в сборе (анодный отсек) представляет собой стеклянный цилиндр, в нижней части которого установлена пластина 5М6.614.003. В месте соединения корпуса с пластиной установлено резиновое кольцо 5М8.683.248. Корпус устанавливается на плите датчика

Характеристики 5М6.116.089

Характеристики:

- Габаритные размеры - 172х32 мм;
- Масса - 55 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.152.051 Устройство ножевое

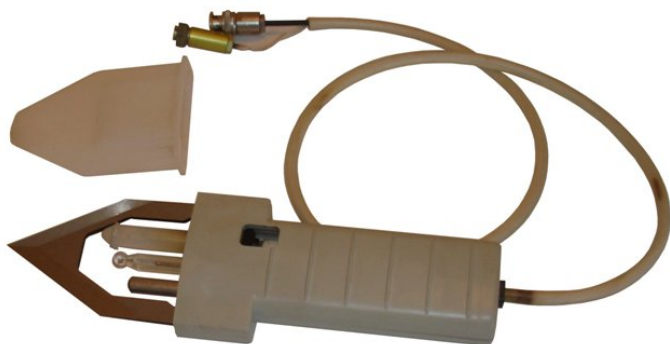

Предназначается для установки электрода типа ЭСКЛ-08М при непосредственном измерении pH мясопродуктов.

Характеристики 5М6.152.051

Характеристики:

- Материалы - полиамид ПА6, сталь 12Х18Н10Т;
- Габаритные размеры - Ø36 мм L=220мм;
- Масса - 0,2 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.210.011 Стакан к АС-7932, АС-7932М



Для АС-7932, АС-7932М. Изготовлен из пластмассы. Выполняет роль промежуточного сосуда и устанавливается на датчике под катодным анодным отсеками сосуда.

Характеристики 5М6.210.011

Характеристики:

- Габаритные размеры - высота 64 мм, Ø 96 мм;
- Масса - 120 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.215.003 Вкладыш к АН-7529/60 и АН-7529/60М



Только для АН-7529 и АН-7529М. Пластмассовый вкладыш с двумя резиновыми накладками и «окошком» из целлюлозной пленки. Располагается между двумя частями сосуда.

Характеристики 5М6.215.003

Характеристики:

- Габаритные размеры - 68х62х18 мм;
- Масса - 55гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.215.004 Вкладыш к АН-7529/60, АН-7529/60М




Только для АН-7560 и АН-7560М. Пластмассовый вкладыш с двумя резиновыми накладками и «окошком» из целлюлозной пленки. Располагается между двумя частями сосуда.

Характеристики 5М6.215.004

Характеристики:

- Габаритные размеры - 68х62х18 мм;
- Масса - 55г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.354.019 Рычаг к АН-7529(М), АН-7560(М)

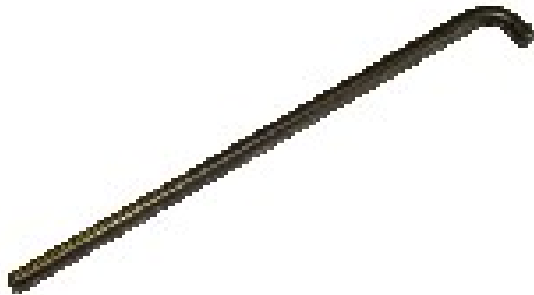

Только для АН-7529(М), АН-7560(М). Предназначен для извлечения клиньев из сосуда.
Представляет собой стержень Ø6 мм из нержавеющей стали с пластмассовой ручкой.

Характеристики 5М6.354.019

Характеристики:

- Габаритные размеры - 210x27 мм;
- Масса - 75 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.393.002 Вертушка магнитная



Предназначается для перемешивания растворов с использованием магнитной мешалки при проведении измерений.

Характеристики 5М6.393.002

Характеристики:

- Материалы - полиэтилен 1020.4-003, стальной сплав марки ЮН14ДК24;
- Габаритные размеры - Ø 8 мм L=23 мм;
- Масса - 5 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.393.004-01 Вертушка магнитная




Предназначается для перемешивания растворов с использованием магнитной мешалки при проведении измерений

Характеристики 5М6.393.004-01

Характеристики:

- Материалы - полиэтилен 1020.4-003, стальной сплав марки ЮН14ДК24;
- Габаритные размеры - Ø 10 мм L=36 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.393.011 Вертушка к АН-7529/60, АН-7529/60М

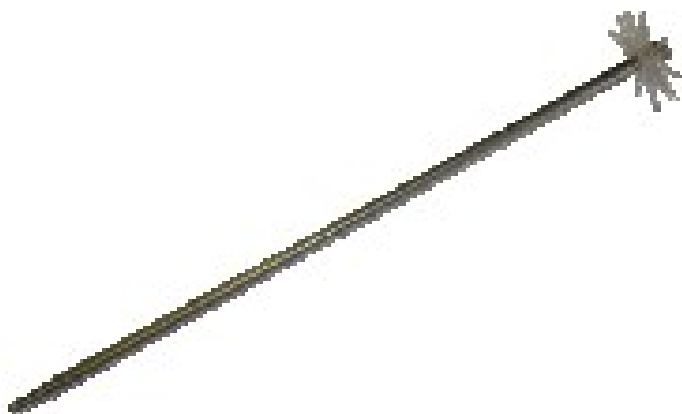

Служит для перемешивания раствора в сосуде АН7529(М), АН-7560(М). Крепится к оси двигателя датчика.

Характеристики 5М6.393.011

Характеристики:

- Материал изготовления:
 - ось - нержавеющей сталь;
 - крестовина – пластмасса;
- Габаритные размеры - 330х45мм;
- Масса - 100 гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.434.005 Оправа к АН-7529/60 и АН-7529/60М



Оправа из металлической сетки, внутри которой вращается вертушка. Располагается в сосуде

Характеристики 5М6.434.005

Характеристики:

- Материал изготовления - нержавеющая сталь;
- Габаритные размеры - 68х64х33 мм;
- Масса - 70 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.437.001 Сетка к АН-7529М/60М



Является составной частью оправы, которая крепится на плите датчика экспресс-анализатора на углерод АН-7529М/60М и погружается в сосуд с раствором. Сетка свернута в цилиндр диаметром 55 мм и скреплена планкой из нержавеющей стали. Внутри сетки для перемешивания раствора вращается вертушка

Характеристики 5М6.437.001

Характеристики:

- Материал - сетка тканная, ячейка 1х1, проволока Ø 0,25 12Х18Н10Т;
- Габаритные размеры - 70 х 54 х 30 мм;
- Масса - 17,5 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.454.004 Штуцер к АС-7932 и АС-7932М



Штуцер 5М6.454.004 устанавливается на плите датчика для подвода анализируемого газа в катодный отсек в анализаторах АС-7932 и АС-7932М.

Характеристики 5М6.454.004

Характеристика	Значение
Диаметр штуцера в сборе вместе с полипропиленовой трубкой	Ø 3мм
Длина трубки	127 мм
Длина штуцера с трубкой	182 мм

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.457.000 Газоотвод к АС-7932 и АС-7932М



Водоохлаждаемая фурма, которая обеспечивает резкое охлаждение газообразных продуктов сгорания. Входит в фильтр-охладитель (газоотборник).

Характеристики 5М6.457.000

Характеристики:

- Материал - нержавеющая сталь;

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.460.009 Зажим



Зажим.

Характеристики 5М6.460.009

Характеристики:

Материал - сталь 20 ГОСТ 1051 -73.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.460.010 Зажим



Зажим.

Характеристики 5М6.460.010

Характеристики:

- Материал - сталь 08кп ГОСТ 9045 -80.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.463.022 Скоба к АН-7529М



Входит в состав экспресс-анализатора на углерод АН-7529М. Представляет собой изогнутую проволоку $\varnothing$ 4 мм со впаянными пятью проволоками $\varnothing$ 1мм из нержавеющей стали. Крепится на плите датчика, выполняет роль катода.

Характеристики 5М6.463.022

Характеристики:

- Материал - проволока 4-П-Н-12Х18Н10Т;
- Габаритные размеры - 105 x 40 x 4 мм;
- Масса - 20 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.607.010 Адаптер



Применяется для подключения электродов со штекером Ø 8 мм к приборам с входным разъемом типа ЭС50.

Характеристики 5М6.607.010

Характеристики:

- Габаритные размеры - 65x46x35 мм;
- Длина кабеля - 250 мм;
- Масса - 100гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.614.003 Пластина к АС-7932 и АС-7932М



Пластина представляет собой кольцо из полистирола с внешним Ø22, внутри которого установлена керамическая перегородка. Размещается в нижней части катодного отсека (корпус 5М6.116.088) и в нижней части анодного отсека (корпус 5М6.116.089).

Характеристики 5М6.614.003

Характеристики:

- Материал - полистирол;
- Диаметр - 22 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.622.056 Ключ электролитический



Предназначен для гидроблока анализатора иономерного рNa -205.

Характеристики 5М6.622.056

Характеристики:

- Материал изготовления - трубка стеклянная 360 8,13/0,70/1240 ТУ ВУ 809000341.001 -2006;
- Габаритные размеры:
 - длина - 138 мм;
 - диаметр - 8,13 мм;
- Масса - 10 гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М6.887.028 Бачок к рNa




Предназначен для настроечного раствора, расположен в гидроблоке анализатора иономерного рNa -205.

Характеристики 5М6.887.028

Характеристики:

- Материалы изготовления:
 - сталь 20 ГОСТ 1051 -73(зажим);
 - сталь 08кп ГОСТ 9045 -80 (зажим);
 - полиэтилен (бутылка ТУ РБ 14777666.001 -95);
 - полипропилен 01020 -06 (крышка);
 - сталь 12х18Н10Т ГОСТ 5632 -72 (гайка);
 - полипропилен 01030 (гайка);
 - трубка медицинская силиконовая ТУ38106152 -77;
- Габаритные размеры:
 - высота - 265 мм;
 - диаметр - 126 мм;
- Масса - 200 гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.010.004 Дроссель к АН-7529/60 и АН-7529/60М

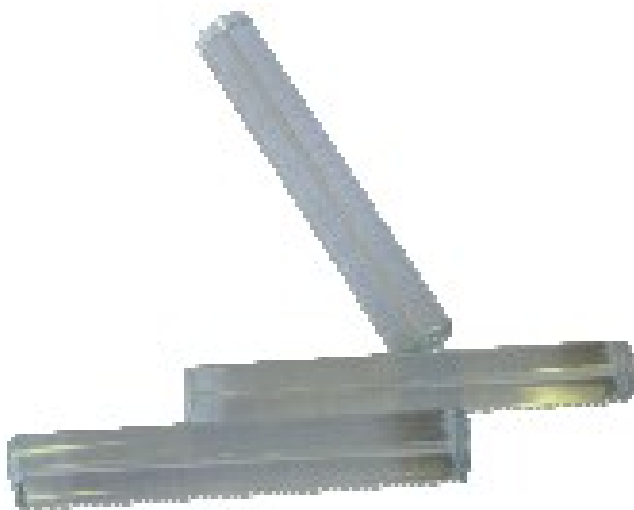

Дроссель к АН-7529/60 и АН-7529/60М.

Характеристики 5М7.010.004

Характеристики:

- Внутренний диаметр - 0,5 мм;
- Внешний диаметр - 4...6 мм;
- Длина - $80 \pm 1,5$ мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.010.005 Дроссель к АН-7529/60 и АН-7529/60М



Стеклянная трубка устанавливается в фильтр тонкой очистки на плите датчика. Допускается дроссель с уменьшенным внутренним диаметром, при этом длина дросселя уменьшается пропорционально уменьшению поперечного сечения отверстия.

Характеристики 5М7.010.005

Характеристики:

- Габаритные размеры:
 - внутренний диаметр - 0,8 мм;
 - внешний диаметр - 6,5...8 мм;
 - длина - 35 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.010.006 Дроссель к АС-7932 и АС-7932М



Стеклянная трубка устанавливается в штуцер на панели блока газоподготовки (гнездо «Датчик»), через который проходит поток поддува.

Характеристики 5М7.010.006

Характеристики:

- Материал - стекло;
- Внутренний диаметр - 0,5 мм;
- Внешний диаметр - 4...6;
- Длина - 35 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.350.002 Цилиндр



Выполнен из прозрачного кварцевого стекла. Является составной частью (корпусом) фильтра грубой очистки, входящего в состав газоотборника.

Характеристики 5М7.350.002

Характеристики:

- Габаритные размеры:
 - длина - 100 мм;
 - диаметр - 32 мм;
- Масса - 35 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.352.002 Трубка дозирующая к БАТ



Изогнутая трубка из стекла. Внешний диаметр трубки в серединной части 3 мм, на концах – 2 мм и 1,2 мм

Характеристики 5М7.352.002

Характеристики:

- Габаритные размеры - 140x5 мм;
- Масса - 1,5 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.352.005 Капилляр к ПУ-1



Предназначен для электрода ртутно-капельного.

Характеристики 5М7.352.005

Характеристики:

- Материал - стекло;
- Габаритные размеры:
 - длина - 150...200 мм;
 - наружный диаметр - 6 мм;
 - внутренний диаметр - 1 мм;
- Масса - 3 гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.840.069 Клин к АН-7529М/60М



Является составной частью сосуда в датчике экспресс -анализатора на угл ерод АН -7529М/60М. Устанавливается в анодном отсеке сосуда и служит для прижатия вкладыша, устанавливаемого между анодным и катодным отсеками.

Характеристики 5М7.840.069

Характеристики:

- Материал - гроднами д ПА6 -ЛТ -СВ30 -П, неокрашенный;
- Габаритные размеры - 95 x 21 x 6 мм;
- Масса - 10,4 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.840.070 Накладка к АН-7529(М)



Только для АН-7529, АН-7529М. Накладка резиновая входит во вкладыш 5М6.215.003.

Характеристики 5М7.840.070

Характеристики:

- Габаритные размеры - 86х66х1 мм;
- Масса - 2г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.840.071 Прокладка к АН-7529/60, АН-7529/60М



Изготовлена из целлюлозной пленки для вкладыша 5М6.215.003 и 5М6.215.004

Характеристики 5М7.840.071

Характеристики:

- Материал - целлюлозная пленка;
- Габаритные размеры - 58х48 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.840.072 Накладка к АН-7560(М)



Только для АН-7560, АН-7560М. Накладка резиновая входит во вкладыш 5М6.215.004.

Характеристики 5М7.840.072

Характеристики:

- Габаритные размеры - 86х66х1 мм;
- Масса - 2г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М7.867.011 Трубка газоподводящая к АС-7932 и АС-7932М



Трубка полипропиленовая устанавливается в штуцер 5М6.454.004, служащий для подвода анализируемого газа в катодный отсек.

Характеристики 5М7.867.011

Характеристики:

- Габаритные размеры:
 - внешний диаметр - 3 мм;
 - длина - 127 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.126.028 Стержень к АН-7529/60М



Входит в запасной комплект экспрессанализатора на углерод АН-7529М/60М, представляет собой изогнутый стержень Ø 6 мм. Предназначен для прочистки трубки, подводящей газ в сосуд с раствором.

Характеристики 5М8.126.028

Характеристики:

- Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;
- Габаритные размеры - 195 x 20 x 6 мм;
- Масса - 45 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.220.102 Втулка



Втулка.

Характеристики 5М8.220.102

Характеристики:

- Материал - гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30-П натуральный;
- Габаритные размеры - 34 x 17 мм;
- Масса - 5 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.227.029 Втулка к АС-7932М




Является составной частью системы электродов в датчике экспресс-анализатора на серу АС-7932М

Характеристики 5М8.227.029

Характеристики:

- Материал - гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30-П натуральный;
- Габаритные размеры - 34 x 17 мм;
- Масса - 5 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.241.011-02 Кольцо к АС-7932 и АС-7932М

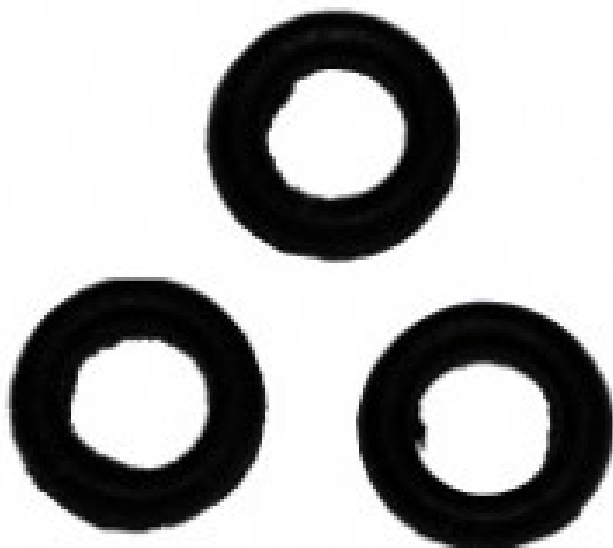


Резиновое кольцо устанавливается в фильтр тонкой очистки для закрепления дросселя 5М7.010.005. Также используется как уплотнительное кольцо в штуцере для подвода анализируемого газа в катодный отсек.

Характеристики 5М8.241.011-02

Характеристики:

- Материал - резина;
- Внутренний диаметр - 5,7мм;
- Внешний диаметр - 9,5 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.241.011-03 Кольцо к АС-7932 и АС-7932М, АН-7529/60 и АН-7529/60М

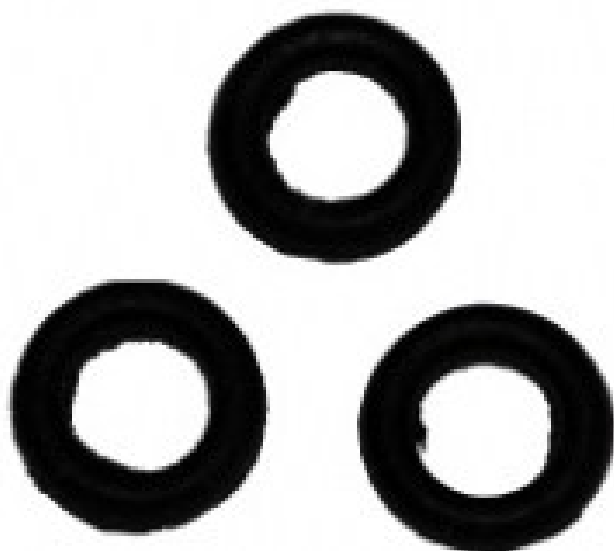


Резиновое уплотнительное кольцо для затвора, который герметизирует фарфоровую трубку, устанавливаемую в печь. Также устанавливается для герметизации в редуктор, расположенный в блоке газоподготовки (между корпусом и нижним фланцем редуктора) и в фильтре-охладителе (газоотборнике) для герметизации между фильтром грубой очистки и зажимным устройством.

Характеристики 5М8.241.011-03

Характеристики:

- Материал - резина;
- Внутренний диаметр - 19,5 мм;
- Внешний диаметр - 26,7 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.241.011-04 Кольцо к АС-7932 и АС-7932М, АН-7529/60 и АН-7529/60М

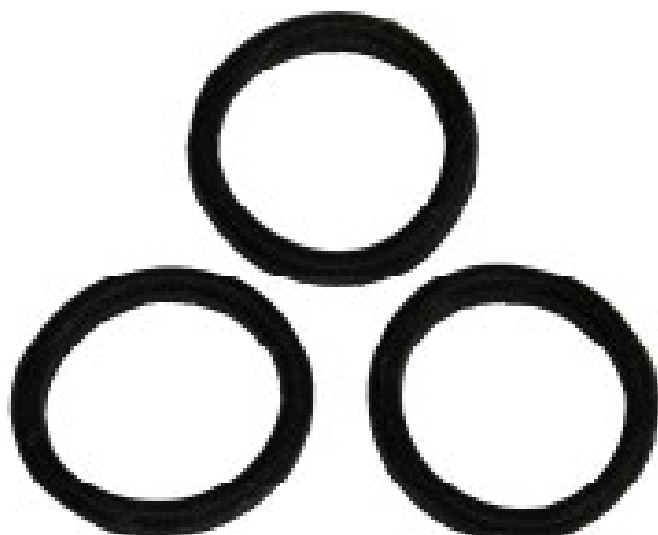


Резиновое кольцо, расположенное на нижней втулке в системе электродов 5М2.840.066 для герметизации при установке электродной системы на плиту датчика.

Характеристики 5М8.241.011-04

Характеристики:

- Материал - резина;
- Внутренний диаметр - 23,5 мм;
- Внешний диаметр - 29,5 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.241.011-05 Кольцо к АС-7932 и АС-7932М, АН-7529/60 и АН-7529/60М

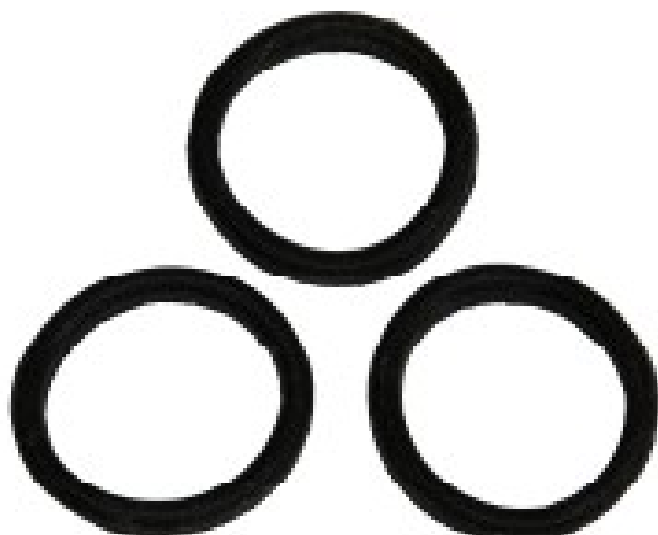

Резиновое уплотнительное кольцо для затвора, который герметизирует фарфоровую трубку, устанавливаемую в печь

Характеристики 5М8.241.011-05

Характеристики:

- Материал - резина;
- Внутренний диаметр - 24,5 мм;
- Внешний диаметр - 31,7 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.241.011-06 Кольцо к АН-7529/60, АН-7529/60М



Резиновое кольцо, устанавливается в фильтр 5М5.886.002 между корпусом и крышкой фильтра для герметичности

Характеристики 5М8.241.011-06

Характеристики:

- Материал - резина;
- Внутренний диаметр - 29,5 мм;
- Внешний диаметр - 38,7 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.241.011-08 Кольцо к АС-7932 и АС-7932М




Резиновое кольцо для уплотнения дросселя 5М7.010.006 при его установке в штуцер.

Характеристики 5М8.241.011-08

Характеристики:

- Материал - резина;
- Внутренний диаметр - 3,8 мм;
- Внешний диаметр - 7,6 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.332.009 Рычаг

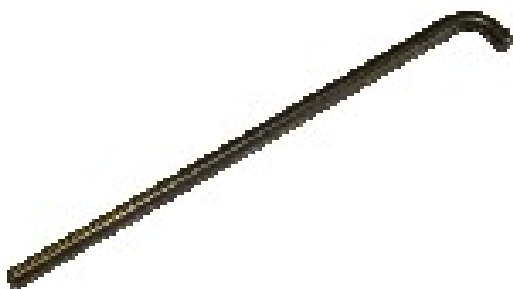

Предназначен для извлечения клиньев из сосуда. Представляет собой стержень Ø6 мм из нержавеющей стали с пластмассовой ручкой.

Характеристики 5М8.332.009

Характеристики:

- Габаритные размеры - 210x27 мм;
- Масса - 75 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.610.033 Пластина к АН-7529(М)



Цинковая пластина изготавливается из сплава ЦО толщиной 4мм.Выполняет роль цинкового электрода. Используется в качестве анода, крепится винтом в левом отсеке сосуда электролитической ячейки

Характеристики 5М8.610.033

Характеристики:

- Материал - цинк;
- Толщина - 4 мм;
- Габаритные размеры - 125х50 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.610.037 Пластина к АН-7560(М)



Цинковая пластина толщина 2 мм (допускается толщина 3,5...4 мм), выполняет роль цинкового электрода. Используется в качестве анода, крепится винтом в левом отсеке сосуда электролитической ячейки.

Характеристики 5М8.610.037

Характеристики:

- Материал - цинк;
- Толщина - 2 мм (допускается толщина 3,5...4 мм);
- Габаритные размеры - 125x16 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.683.167 Прокладка



Выполнена из слюды. Устанавливается в затворе 5м6.272.004 под откидными крышками в количестве 2 шт

Характеристики 5М8.683.167

Характеристики:

- Габаритные размеры - 27 мм;
- Толщина - 0,3 мм;
- Масса - 0,25 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.683.248 Кольцо к АС-7932 и АС-7932М



Резиновое кольцо для обеспечения герметичности в местах соединения пластины 5М6.614.003 с катодным и анодным отсеками в корпусах.

Характеристики 5М8.683.248

Характеристики:

- Материал - резина;
- Внутренний диаметр - 16,5 мм;
- Внешний диаметр - 22 мм.

ЗИП ГОМЕЛЬ 5М8.934.023 Гайка к АС-7932 и АС-7932М



Шестигранная гайка, выполненная из термоустойчивой стеклонаполненной пластмассы, устанавливается в систему электродов 5М2.840.075 в количестве 2 шт. для крепления нижней втулки

Характеристики 5М8.934.023

Характеристики:

- Габаритные размеры - 14x9 мм;
- Масса - 1,2 г.

ЗИП ГОМЕЛЬ 7077.01.02.015 Колпачок к УС



Алюминиевые колпачки надеваются на торцы нагревателей перед их установкой в печь для улучшения электрического контакта.

Характеристики 7077.01.02.015

Характеристики:

- Материал - алюминий;
- Габаритные размеры:
 - высота - 8 мм;
 - внешний диаметр - 15,5 мм;
- Масса - 2 гр.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.4070.009 Комплект запчастей к И-160МП



Предназначается для сопряжения И-160 с компьютером, для сопряжения измерительных электродов со штекером Ø 8 мм с разъемом «ИЗМ.» типа СР50.

Характеристики ВЯЛ.4070.009

Характеристики:

- Материалы - латунь ЛС59-1, поликарбонат ПК-ЛЭТ-7, полистирол 825, поливинилхлорид;
- Масса - 0,25 кг.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.4070.010 Комплект запчастей к УС-7077 (МУФЕЛЬ)



Комплект запчастей к УС-7077 (Муфель)

Характеристики ВЯЛ.4070.010

Характеристики:

- Производитель - Зип Гомель.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.8240.001 Кольцо АК зеленого цвета



Кольцо АК зеленого цвета.

Характеристики ВЯЛ.8240.001

Характеристики:

- Материал - резина.

ЗИП ГОМЕЛЬ Диск CD с ПО



Диск с программным обеспечением.

Характеристики

Характеристики:

- Производитель - ЗИП Гомель.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gzm@nt-rt.ru || сайт: <https://gomelzip.nt-rt.ru/>